

CONFORMITATE CU STANDARDELE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Detergent si dezinfectant sporicid, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H_2O_2)

Formula inovativa a Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S ofera beneficiile unei solutii patentate* pe baza de peroxid de hidrogen si a unui spectru larg de eficacitate.

Produsul are eficacitate impotriva unui spectru larg de bacterii si virusuri, fara a lasa reziduuri de substanta activa pe suprafata de actiune, datorita evaporarii foarte rapide.

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S ofera:

- ▲ H_2O_2 ™ cu viteza mare de actiune
- ▲ Conformitate cu EN 16615
- ▲ Ingrediente active ce se descompun in apa si oxigen
- ▲ Servetele sporicide & virucide pentru toate suprafetele
- ▲ Compatibilitate excelenta cu materialele

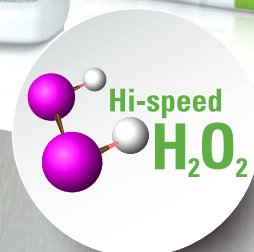

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Detergent si dezinfectant sporicid, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H_2O_2 ™)



Sporicid impotriva C.difficile (TEST SUSPENSIE)



Virucid (CONDITII CURATE)



Bactericid (EN 13727 / 16615)

Caracteristici	Beneficii
EFICACE	Spectru larg de eficacitate Timpuri redusi de contact
SIGUR	Ingredientele active se descompun in apa si oxigen. Compatibilitate excelenta cu materialele
CONVENABIL	Curata & dezinfecteaza intr-o singura etapa Ambalari gata de utilizare

REZULTATE TESTE MICROBIOLOGICE SI VIRUSOLOICE

EFICACITATE (NEDILUAT)	OxyFoam S TIMP CONTACT	OxyWipe S TIMP CONTACT
Dezinfectia suprafetelor in conf. cu metoda VAH 2015 (incl. EN 16615), cond. murdare		
Bactericid, levuricid	5 min	15 min
Fungicid	5 min	30 min
Micobactericid	15 min	30 min
Testat conf. recomandarilor RKI 01/2004* (cond. murdare)		
Eficace impotriva virusurilor anvelopate in conf. cu recomandarile RKI 01/2004*	15 sec	30 sec
Adeno*	30 sec	1 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Standarde europene (conditii curate & murdare)		
EN 13727 (bactericid)	1 min	2 min
EN 13624 (levuricid)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicid)	5 min	30 min
EN 14348 (tuberculocid, micobactericid)	5 min	30 min
EN 14476 (virucid)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sec	30 sec
EN 14476 Noro	1 min (clean conditions) 15 min (dirty conditions)	15 min
EN 13704 (sporicid)**	30 min	60 min
EN 13704 (C. difficile)**	3 min	15 min
Standarde europene (conditii murdare) - test pe 4 zone		
EN 16615 (bactericid)	1 min	2 min
EN 16615 (levuricid)	1 min	1 min
EN 16615 (fungicid)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberculocid, micobactericid)	5 min	5 min
Sporicid (metoda EN 16615)**	15 min	30 min
C. difficile (metoda EN 16615)**	5 min	5 min

* DVV 2008 ** clean conditions

INCIDIN OXYFOAM S INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



- 1 Pulverizati pe suprafata de la aprox. 30 cm
- 2 Stergeti suprafata asigurandu-va ca este complet umezita
- 3 Lasati sa se usuce



- 1 Aplicati pe un servetel uscat
- 2 Stergeti suprafata asigurandu-va ca este complet umezita
- 3 Lasati sa se usuce

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

www.de.ecolab.eu

ECOLAB ROMANIA

Centrul de Afaceri IDEO,
Sos Pacurari, nr 138, Iasi
Romania
+40 (0) 232 22 22 10
www.ro.ecolab.com

CE 0297

**EFICACE.
SIGUR.
CONVENABIL.**

DOMENIUL DE UTILIZARE

Incidin OxyFoam S: Produs spuma pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor si obiectelor de inventar din domeniul medical (incl. sonde)



Incidin OxyWipe S: Servetele pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor si obiectelor de inventar din domeniul medical (incl. sonde)



© BIOZID N-12164

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Incidin OxyFoam S: Pulverizati suprafata de la aprox. 30 cm sau aplicati direct pe un servetel curat. Stergeti suprafata asigurandu-va ca aceasta este complet acoperita pe durata timpului de contact. Sau puteti utiliza produsul nediluat pe un servetel curat, stergeti suprafata si lasati sa se usuce.

Incidin OxyWipe S: Luati un servetel din pachet. Umetcati foarte bine suprafata asigurandu-va ca aceasta ramane umea pe durata timpului de contact. Lasati sa se usuce fara a clati. Asigurati-va ca toata suprafata a fost acoperita. Inchideti capacul pachetului dupa utilizare.

A nu se utiliza pentru dezinfectia terminala a dispozitivelor medicale invazive. Nu utilizati pe suprafetele sensibile la agenti oxidanti, cum ar fi marmura, cupru sau alama.

INGREDIENTE

100g produs contine urmatoarele substante active:

Incidin OxyFoam S: 1.5g peroxid de hidrogen

Incidin OxyWipe S: 1.5g peroxid de hidrogen

AMBALARE SI INFORMATII DESPRE COMANDA

PRODUS	AMBALARE	COD COMANDA
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082910
Incidin OxyWipe S	6 x 100	3082240

DEPOZITARE

Produsele se depoziteaza in ambalaj original la temperaturi sub 25°C, intr-un loc ventilat, uscat si fara a fi expuse direct la razele solare.

Valabilitate produs dupa deschidere:

Incidin OxyFoam S: Data de expirare

Incidin OxyWipe S: 1 luna

Referinte

1. Incidin OxyFoam S

UTILIZATI BIOCELE IN SIAGRANTA. CITITI INTOTDEAUNA DESCRIEREA SI INFORMATIILE DESPRE PRODUS INAINTE DE FOLOSIRE. DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.

ECOLAB®