


NOTA MAXIMA PENTRU DEZINFECTIA PROFESIONALA A SUPRAFETELOR

Incidin® Pro

Detergent dezinfectant concentrat pentru suprafete. Nu contine aldehide

Datorita formularii SMART BALANCED, Incidin® Pro impune un nou standard in curatarea si dezinfectia suprafetelor.

- ▲ Pro pentru eficacitate
- ▲ Pro pentru rapiditate
- ▲ Pro pentru compatibilitate

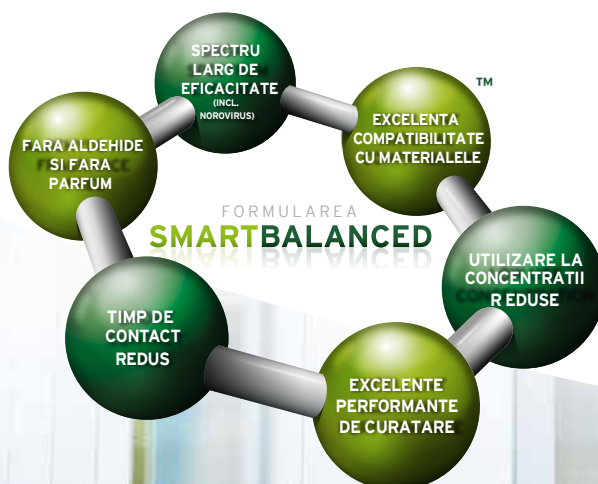

NOU!



Incidin® Pro



Nota maxima pentru dezinfectia Profesionala a suprafetelor

NOUL INCIDIN PRO - PRO PENTRU EFICACITATE

EFICACITATE	CONCENTRATIE		TIMP DE CONTACT MIN
	%	ml/L	
Dezinfectia suprafetelor conf. DGHM metoda 2001 cu actiune mecanica (bactericid, levuricid), cond. curate & murdare	0.5 1.0	5 10	30 15
Bactericid - EN 13727, cond. curate & murdare	0.25	2.5	5
Levuricid - EN 13624, cond. curate & murdare	0.25	2.5	5
Dezinfectia suprafetelor conf. DGHM metoda 2001 cu actiune mecanica (tuberculocid si micobactericid)	2.0 4.0	20 40	120 60
Tuberculocid si micobactericid conf. EN 14348, cond. curate & murdare	1.5	15	60
Eficace impotriva virusurilor invelite conf. RKI 01/2004 (incl. HIV, HBV, HCV)	0.25 0.5	2.5 5	30 15
Adenovirus* Polyomavirus SV 40* Rotavirus* Norovirus (MNV)*	2.0 1.5 1.0/1.5 1.5	20 15 10/15 15	60 15 60/5 30
Norovirus (MNV) conf. EN 14476, cond. curate & murdare	1.5	15	30

*conform. DVV 2008

MOTIVE PENTRU A UTILIZA INCIDIN® PRO

Spectru larg de eficacitate cu timp de contact redus

Eficacitatea antimicrobiana a Incidin Pro este completata de timpii de contact scazuti si compatibilitate excelenta cu materialele. Eficace impotriva bacteriilor, levurilor si a virusurilor (inclusiv norovirus), Incidin Pro este recomandat pentru zone cu risc inalt si pentru o gama larga de suprafete, de la cabinete medicale si spatii publice pana la sali de operatii si sectii de terapie intensiva.

Putere de curatare excelenta si compatibilitate cu materialele

A fost testat minutios pe toate tipurile de suprafete regasite in mod frecvent in spatiile medicale - de la

metale, linoleum si obiecte din PVC pana la ceramica, plastic si cauciuc - obtinandu-se rezultate excelente.

Conform standardelor de testare EN

Testele efectuate conform standardelor EN relevante pentru domeniul medical, au confirmat, pe baza celor mai noi metode DVV, spectrul larg de eficacitate al produsului Incidin Pro, inclusiv impotriva Norovirusului. A se vedea detalii in tabelul de mai sus.

Formula fara aldehide, parfum si coloranti.

Sistemul de ingrediente non-volatile si fara parfum asigura o utilizare comoda si mai ales sigura.

Mai multe informatii disponibile pe

www.ecolab.eu

sau contactati reprezentantul Ecolab.

RAPID.
EFICACE.
AVANSAT.

DOMENIU DE APLICARE

Incidin® Pro este un produs lichid concentrat pentru curatarea si dezinfectia tuturor tipurilor de suprafete si a obiectelor din domeniul medical.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Diluati concentratul cu apa de calitate adecvata (max 30°C) pana la concentratia dorita. Umectati complet suprafata cu o cantitate suficienta de solutie si lasati sa se usuce.

Pentru a obtine de ex. o solutie de 0,5% v/v preparati o dilutie 1:200 cu apa: 5ml de Incidin® Pro se adauga la 995ml de apa curata (potabila), si se obtine in total un volum de 1 litru,

INGREDIENTE

100g produs contin urmatoarele substante active:

- 10,0g 2-Phenoxyethanol,
- 8,0g N,N-bis-(3-aminopropil) dodecilamina,
- 7,5g clorura de benzalconiu

AMBALARE SI DATE PENTRU COMANDA

PRODUS	AMBALARE	COD COMANDA
Incidin® Pro Flacon	3 x 2L	30 766 20
Incidin® Pro Canistra	6L	30 767 30
Incidin® Pro Canistra	30L	30 767 80
Incidin® Pro Butoi	200L	30 767 90

DEPOZITARE

Pastrati produsul in recipientul original, la temperaturi sub 25° C in locuri uscate, ferite de raze solare directe.

UTILIZATI BIOCIDELE IN SIGURANTA. CITITI INTOTDEAUNA INFORMATIILE DESPRE PRODUS INAINTE DE UTILIZARE.

Ecolab SRL.

Centrul de afaceri "IDEO",
Sos. Pacurari nr. 138 et. 2,
700545 - Iasi Tel.: 0232222210
www.ecolab.eu



ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0

